




Prefert®

Gel vaginal pentru cupluri care încearcă să conceară un copil
Вагинален гел при желание за забременяване
Hüvelygél gyermekvágý esetén
期望受孕时使用的阴道凝胶

Medintim

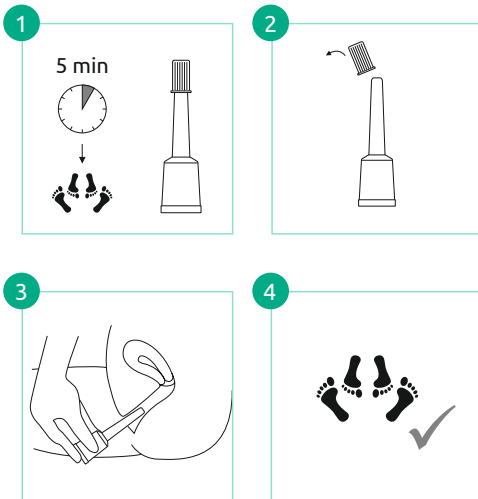

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de folosire!
Прочетете инструкциите за приложение преди употреба
Olvassa el a használati útmutatót!
请在使用前阅读使用说明!

Prefert® Gel vaginal pentru cupluri care încearcă să conceară un copil

Mod de acțiune:

Prefert® gel vaginal creează un mediu propice pentru ca sperma să aibă șanse optime de a ajunge la ovulele femeii.

Proprietățile sale osmotice asigură un excelent spațiu de manevră. Acest lucru sporește motilitatea spermei și constituie impulsul ideal pentru spermatozoizi, ca să-și găsească drumul spre ovulele femeii.

Având un pH neutru de 7,2, Prefert protejează sperma de un mediu prea acid, asigurând astfel supraviețuirea spermatozoidilor.

În comparație cu lubrifianții clasici, solubili în apă, Prefert® gel vaginal îmbunătățește motilitatea spermei.

Când se utilizează:

Indicat pentru utilizare temporară în cele mai fertile trei zile ale ciclului femeii (perioada de ovulație).

A se utiliza o singură dată în decurs de 24 de ore.

Ingrediente:

Apă purificată, clorură de sodiu, fosfat de sodiu, fosfat de potasiu, arabino-galactan, hidroxiethylceluloză, polihexanidă

Mod de administrare:

Se introduce cu 5 minute înaintea actului sexual.

1. Înainte de începerea raportului sexual, scoateți din cutie un aplicator Prefert® gel vaginal, de unică folosință.

2. Scoateți capacul.

3. Introduceți aplicatorul vaginal în vagin. Comprimați aplicatorul pentru a introduce gelul. Îndepărtați aplicatorul.

4. Acum puteți avea raporturi sexuale.

Conținutul cutiei este suficient pentru 8 aplicații.

După utilizare, aruncați aplicatorul gol la gunoierul menajer. Fără parabenii.

Informații:

Dacă Prefert® gel vaginal vă provoacă iritații la utilizare, întrerupeți tratamentul și adresați-vă medicului dumneavoastră.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Prefert® gel vaginal dacă ați fost supusă recent unei intervenții chirurgicale vaginale sau dacă aveți o infecție vaginală acută.

Română

Вагинален гел **Prefert®** при желание за забременяване

Начин на действие:

Вагиналният гел Prefert® създава среда за оптимално придвижване на spermatozoidите към яйцеклетката.

Неговите осмотични свойства осигuravат оптимални условия за свободно движение. Това подпомага подвижността на spermatozoidите и е идеално помощно средство за успешно придвижване към яйцеклетката.

С неутрален водороден показател (pH) от 7,2, Prefert® предпазва spermatozoidите от прекалено киселинна среда и по този начин гарантира тяхното оцеляване.

Вагиналният гел Prefert® подобрява подвижността на spermatozoidите в сравнение с класическите, водоразтворими lubrikanti.

Период на приложение:

За временна употреба по време на трите най-благоприятни за зачеване дни от менструалния цикъл (период на ovulacia).

Използвайте само веднъж в рамките на 24 часа.

Съставки:

пречистена вода, натриев хлорид, натриев фосфат, калиев фосфат, арабинолактан, хидроксиетилцелулоза, полихексанид

Приложение:

Поставете 5 минути преди полов акт.

1. Преди полов акт извадете aplicatorul за еднократна употреба Вагинален гел Prefert® от опаковката.

2. Махнете капачката.

3. Поставете вагиналният aplicator във влагалището. Стигнете aplicatorul, за да изстискате гела. Извадете aplicatorul.

4. Сега можете да започнете половия акт.

Съдържанието на опаковката е достатъчно за 8 приложения.

След употреба изхвърлете празния aplicator в битовите отпадъци.

Без парабени (консерватори).

Указания:

Ако почувствате дразнене, когато използвате вагиналният гел Prefert®, прекратете употребата и се консултирайте с Вашия лекар.

Моля, съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте вагиналният гел Prefert®, ако наскоро сте се подложили на вагинална операция или ако имате остра вагинална инфекция.

Български

Prefert® hüvelygél gyermekvágy esetén

Hatásmechanizmus:

A Prefert® hüvelygél olyan környezetet teremt, melyben a spermiumok optimálisan tudnak a petesejtig haladni.

Ozmotikus tulajdonságai optimális mozgásteret biztosítanak. Ez támogatja a spermiumok mozgékonyágát és ezáltal ideális segítséget a petesejt sikeres eléréséhez.

A 7,2-es semleges pH-értéknek köszönhetően a Prefert megvédi a spermiumokat a túl savas környezet hatásaitól és ezáltal biztosítja túlélésüket.

A Prefert® hüvelygél feljavítja a spermiumok mozgékonyágát a klasszikus, vízben oldódó síkosítószerrel szemben.

Alkalmazás időtartama:

A női ciklus három legtermékenyebb napján (a peteérés időpontjában) történő átmeneti alkalmazásra.

24 órán belül csak egyszer szabad alkalmazni.

Összetevők:

Tisztított víz, nátrium-klorid, nátrium-foszfát, kálium-foszfát, arabinogalaktán, hidroxietil-cellulóz, polihexanid

Alkalmazás:

A közösülés előtt 5 perccel kell a hüvelybe juttatni

1. Vegyen ki a közösülés előtt egy egyszerhasználatos Prefert® hüvelygél applikátort a csomagolásból.
2. Távolítsa el a zárókupakot.
3. Vezesse be a hüvelybe a hüvelyapplikátort. Nyomja össze az applikátort, hogy ezáltal a gél bekerüljön a hüvelybe. Távolítsa el az applikátort.
4. Most sor kerülhet a nemi érintkezésre.

A csomagolás tartalma 8 alkalmazásra elegendő. Az üres applikátort alkalmazás után dobja a háztartási hulladékba.

Parabénmentes.

Megjegyzések:

Ha irritáció lép fel a Prefert® hüvelygél alkalmazása során, fejezze be az alkalmazást és forduljon orvosához.

Gyermekek elől elzárva tartandó.

Ne alkalmazza a Prefert® hüvelygél, ha a közelmúltban hüvelyi beavatkozást végeztek Önnél vagy ha akut hüvelyi fertőzésben szenved.

Prefert® 期望受孕时使用的阴道凝胶

作用方式:

Prefert®阴道凝胶可以创造良好环境,使精子能够顺利移动至卵细胞。

其渗透特性可提供理想的活动空间。

从而促进精子活力,帮助其成功进入卵细胞。

Prefert通过7.2的中性pH值保护精子免受酸性环境影响,确保其存活。

Prefert®阴道凝胶与传统水溶性润滑剂相比可改善精子活力。

使用时间:

请在女性月经周期中最容易受孕的三天内(排卵期)使用。

24小时内仅可使用一次。

成分:

纯净水、氯化钠、磷酸钠、钾、磷酸盐、阿拉伯半乳糖、羟乙基纤维素、聚己缩胺

使用:

性交前5分钟导入。

1. 请在性行为前将一支一次性Prefert®阴道润滑凝胶取出包装
2. 取下密封盖。
3. 将阴道给药器插入阴道。按压给药器,使凝胶导入。移除给药器。
4. 现在可以开始进行性行为。

包装中的容量可使用8次。

使用后,空的给药器应作为家庭垃圾进行废弃处理。

不含对羟基苯甲酸酯。

提示:

如果您在使用Prefert®阴道润滑凝胶时有刺激性感觉,请您中断使用并咨询医生。

在儿童无法触及的位置存放。

如最近接受过阴道手术或患有急性阴道炎,请不要使用Prefert®阴道润滑凝胶。



A nu se reutiliza | Да не се използва повторно. | Nem újrahazsnosítható | 不得再次使用



Deșeur | Отпадък | Hulladék | 垃圾



A se menține uscat. | Да се пази от влага. | Nedvességtől óvni kell. | 防潮



Limite de temperatură | Граница на допустимата температура | Hőmérséklet korlátozás | 温度限度



KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

www.medintim.de



Made in Germany



GEL PREFERT8 SE



Prefert®

Vaginal Gel

free of
silicones,
parabens &
mineral
oils

Dispozitiv medical pentru utilizare la domiciliu destinat cuplurilor care încearcă să conceapă un copil în perioada ovulației

Медицински продукт за домашна употреба при желание за забременяване по време на овулация

Orvostechikai eszköz gyermekvágy esetén a peteérés alatti otthoni alkalmazásra

排卵期受孕时使用的家用医疗产品

www.prefert.com

Medintim